

PHILIPS

sonicare

OralCare



Tecnologia sonora al servizio della salute dei tuoi pazienti

Manuale per dentisti e igienisti dentali

Contenuti

C'è sempre un modo per spazzolare meglio	4
La tecnologia sonora di Philips Sonicare	6
Spazzolare correttamente con uno spazzolino sonico	10
Paziente parodontale	12
Bambini	16
Paziente con apparecchio ortodontico	20
Paziente con protesi dentaria	24
Difetti non cariogeni e pigmentazioni	28
Domande frequenti dei pazienti.....	32
Testine Philips Sonicare	34
Spazzolini elettrici Philips Sonicare	37

Nota: questo materiale non mostra i prodotti con accessori e testine inclusi nelle confezioni, ma secondo la raccomandazione specifica dei professionisti dentali.





C'è sempre un modo per spazzolare meglio

“Gli spazzolini sonici ad alta frequenza ed elevata ampiezza di oscillazione delle setole sono in grado di ridurre placca e gengivite in maniera significativamente più efficace rispetto allo spazzolino manuale nell'utilizzo quotidiano in studi di durata fino a 3 mesi.”

de Jager M, Rmaile A, Darch O, Bikker JW. The Effectiveness of Manual versus High-Frequency, High-Amplitude Sonic Powered Toothbrushes for Oral Health: A Meta-Analysis. J Clin Dent. 2017 Mar;28(1 Spec No A):A13-28.

“C’è sempre un modo per spazzolare meglio.”

Questa semplice idea è il concetto base di questo manuale dedicato a dentisti, igienisti dentali e ai loro pazienti.

Tecnologia e impegno professionale con un obiettivo comune:

1. Philips Sonicare propone continue **innovazioni** che aiutano i pazienti a migliorare la salute dentale
2. **l’impegno dei professionisti dentali**, che assieme ai loro pazienti cercano la migliore soluzione di igiene orale personalizzata.

Il manuale presenta **5 tipi di pazienti** e le problematiche che si riscontrano nell’igiene orale quotidiana. Ogni capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **indicazione di specifici prodotti Philips Sonicare** a seconda dello stato di dentizione e del parodonto
- **tecniche di spazzolamento** consigliate
- **raccomandazioni** importanti

Tutti i capitoli sono supportati da fotografie con casi clinici di applicazione pratica, in modo da poter facilmente e rapidamente studiare gli argomenti e trasmettere direttamente ai pazienti i suggerimenti appresi.

Speriamo che questo nuovo manuale contribuisca a migliorare l’orientamento nella raccomandazione dei prodotti Philips Sonicare.

Il team Philips Oral HealthCare

Rimozione della placca con tecnologia sonora

Azione fluido dinamica

La miscela di dentifricio, saliva e acqua crea un'azione fluido dinamica nelle zone difficili da raggiungere e produce sottili microbolle di ossigeno che agiscono nel solco gengivale e negli spazi interdentali.

È statisticamente dimostrato che gli spazzolini sonici consentono una riduzione della quantità di placca e di gengivite sensibilmente maggiore rispetto ad uno spazzolino manuale.⁽¹⁾


Cosa rende diversi i nostri spazzolini?

La **tecnologia sonora** efficace ma delicata degli spazzolini Philips Sonicare li rende adatti ad ogni tipo di esigenza. Per una profonda sensazione di pulizia mai provata prima.

Grazie alla tecnologia sonora la testina si muove ad alta frequenza, fino a **62.000 movimenti al minuto**. Il movimento crea delle sottili microbolle di ossigeno che vengono direzionate tra gli spazi interdentali, per pulire delicatamente e in profondità. **Per una sensazione di pulizia che puoi vedere e sentire.**

Tutti gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati di:

- **Tecnologia sonora**
- **SmarTimer:** timer per aiutare il paziente a dedicare il corretto tempo di spazzolamento
- **Programma EasyStart:** aumenta gradualmente l'ampiezza del movimento della testina per aiutare ad abituarsi a una nuova modalità di pulizia, diversa dallo spazzolino manuale

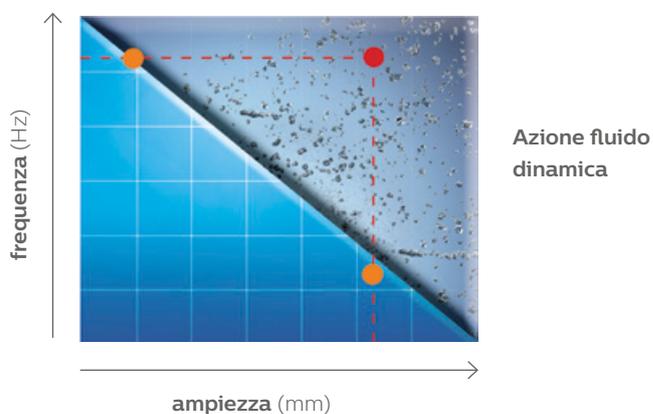

Oscillazioni ad alta frequenza
in direzione latero-laterale

fino a 62.000 movimenti
al minuto

Quali sono i vantaggi della tecnologia sonora?

Efficacia nella rimozione di placca e riduzione delle gengiviti

Lo spazzolino con tecnologia sonora consente una riduzione della quantità di placca e di gengivite sensibilmente maggiore rispetto ad uno spazzolino manuale.


Obiettivo:

- Comparare la rimozione della placca utilizzando Philips Sonicare DiamondClean rispetto a uno spazzolino manuale.
- Valutare l'efficacia nel ridurre la gengivite e il sanguinamento gengivale di Philips Sonicare DiamondClean rispetto a uno spazzolino manuale.


Materiali e metodi: Studio condotto da un laboratorio indipendente su 142 soggetti, tra i 18 e i 64 anni, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 2 settimane.

Conclusione: Philips Sonicare DiamondClean rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale ed è 2 volte più efficace nel ridurre la gengivite e il sanguinamento gengivale rispetto a uno spazzolino manuale.⁽²⁾

Percentuale di rimozione della placca a 2 e 4 settimane

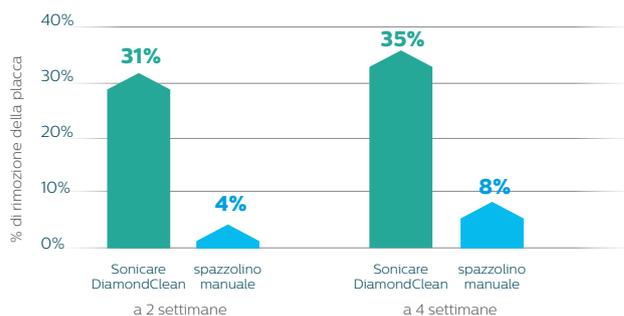

Percentuale di riduzione della gengivite a 2 e 4 settimane

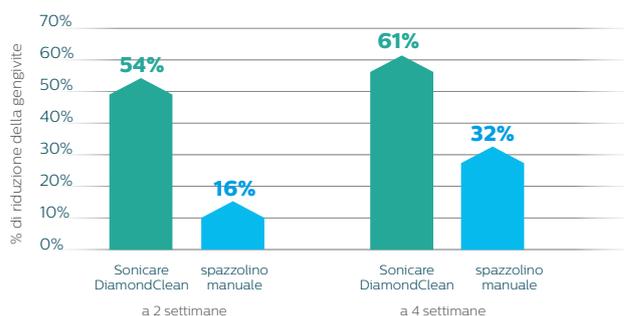

⁽¹⁾ De Jager M, Schmitt P, Jain V, Master A, Wei J, Strate J. J Dent Res 89 (Spec Iss B): 3694, 2010

⁽²⁾ Studio condotto da un laboratorio indipendente, in USA, nel 2011, su 142 soggetti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 4 settimane. Delaurenti M, et al. "An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis" Journal of Dental Research. 2012 91(Special Issue B):522

Design e morbidezza delle setole

Philips Sonicare

Gli spazzolini sonici Philips Sonicare differiscono enormemente rispetto agli spazzolini manuali. Le loro caratteristiche setole sono ottimizzate per l'uso quotidiano e la rimozione efficace e sicura della placca.



Design delle setole

Il design lineare delle setole ci costringerebbe ad applicare troppa pressione sullo spazzolino. La diversa lunghezza delle setole Philips Sonicare permette di "abbracciare" il dente e la gengiva grazie al movimento ad alta frequenza. In questo modo le setole lavorano meglio sulla superficie distale e mesiale dei denti.



Setole sagomate di una testina Philips Sonicare



Setole lineari di uno spazzolino manuale


Morbidezza delle setole

Setole troppo morbide collasserebbero durante i movimenti ad alta frequenza. Le setole compatte ma delicate Philips Sonicare si muovono in modo coordinato, pulendo solo con le estremità. Con la tecnologia sonora non è necessario applicare pressione sullo spazzolino e nessun altro movimento (per esempio circolare).



Setole morbide compatte Philips Sonicare

Esempio: Il movimento coordinato spazzola delicatamente solo con le estremità delle setole.

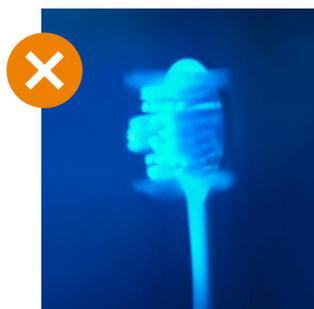

Setole ultradelicate o sottili

Esempio: Collassamento di setole troppo morbide.

SUGGERIMENTO: Prova a fare un movimento circolare sul dorso della mano con lo spazzolino Sonicare spento: il contatto con la pelle sarà fastidioso. Aziona lo spazzolino elettrico e appoggialo leggermente sul dorso della mano, la sensazione sarà quella di un massaggio morbido e delicato.



Spazzolare correttamente con uno **spazzolino sonico**

Per migliori risultati: spazzola per 2 minuti lungo il margine gengivale di tutte le superfici dei denti vestibolari e linguali. Quindi riaccendi lo spazzolino e spazzola tutte le superfici occlusali e accarezza tutta la superficie della corona dei denti frontali per una migliore rimozione della placca.



tempo di pulizia ottimale
con uno spazzolino elettrico
sonico

L'impugnatura dello spazzolino sonico si differenzia da quella di uno spazzolino manuale. Teniamo lo spazzolino sonico costantemente con tutte le punte delle dita come un archetto.





Applicazione del dentifricio

Applicare solo una piccola quantità di dentifricio, scelto sulla base delle esigenze del paziente, per non rovinare denti e gengive.



Posizionamento dello spazzolino

Posizionare lo spazzolino in modo tale da toccare con la superficie delle setole sia denti che gengive contemporaneamente. Puntare le setole direttamente sotto la gengiva a un angolo di 45°. Non esercitare eccessiva pressione sullo spazzolino.



Da un dente all'altro

Attivare lo spazzolino e lasciare agire per due secondi su ciascun dente, spostarsi gentilmente dalla zona posteriore alla zona frontale.



Superfici interne

Non dimenticare di pulire le superfici interne del dente con la stessa tecnica, sia nell'arcata superiore che in quella inferiore.



Orientare verticalmente lo spazzolino quando si lavano le superfici interne dei denti anteriori

Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle superfici interne dell'arcata inferiore. La placca dentale non rimossa si trasforma rapidamente in tartaro in quest'area.



Superfici masticanti

Spazzola anche la superficie masticante con il movimento delicato dello spazzolino.



Denti posteriori

Assicurati di spazzolare anche gli ultimi molari sulle loro superfici più posteriori.

! Per un'igiene orale ottimale, aggiungiamo la pulizia interdentale come routine quotidiana, separata dall'utilizzo dello spazzolino sonico.

Paziente **parodontale**



“...lo spazzolino Sonicare DiamondClean è risultato essere più efficace in maniera statisticamente significativa nel ridurre la placca sopragengivale, l’infiammazione gengivale e il sanguinamento gengivale in un periodo di utilizzo domiciliare di quattro settimane.”

DeLaurenti M, Ward M, Souza S, Jenkins W, Putt MS, Milleman KR, Milleman JL. The Effect of Use of a Sonic Power Toothbrush and a Manual Toothbrush Control on Plaque and Gingivitis. J Clin Dent. 2017 Mar;28 (1 Spec No A):A1-6.

Sensore di pressione
Impostazione dell'intensità
Ossidazione



Gengiviti



Per i tuoi pazienti che soffrono di gengive infiammate, gonfie e sensibili le setole sottili di **S Sensitive** sono la soluzione ideale.




S Sensitive



Completa la terapia con **AirFloss Ultra**, un aiuto aggiuntivo per prendersi cura delle gengive infiammate mediante applicazione mirata di collutorio antibatterico.



Beccuccio AirFloss Ultra

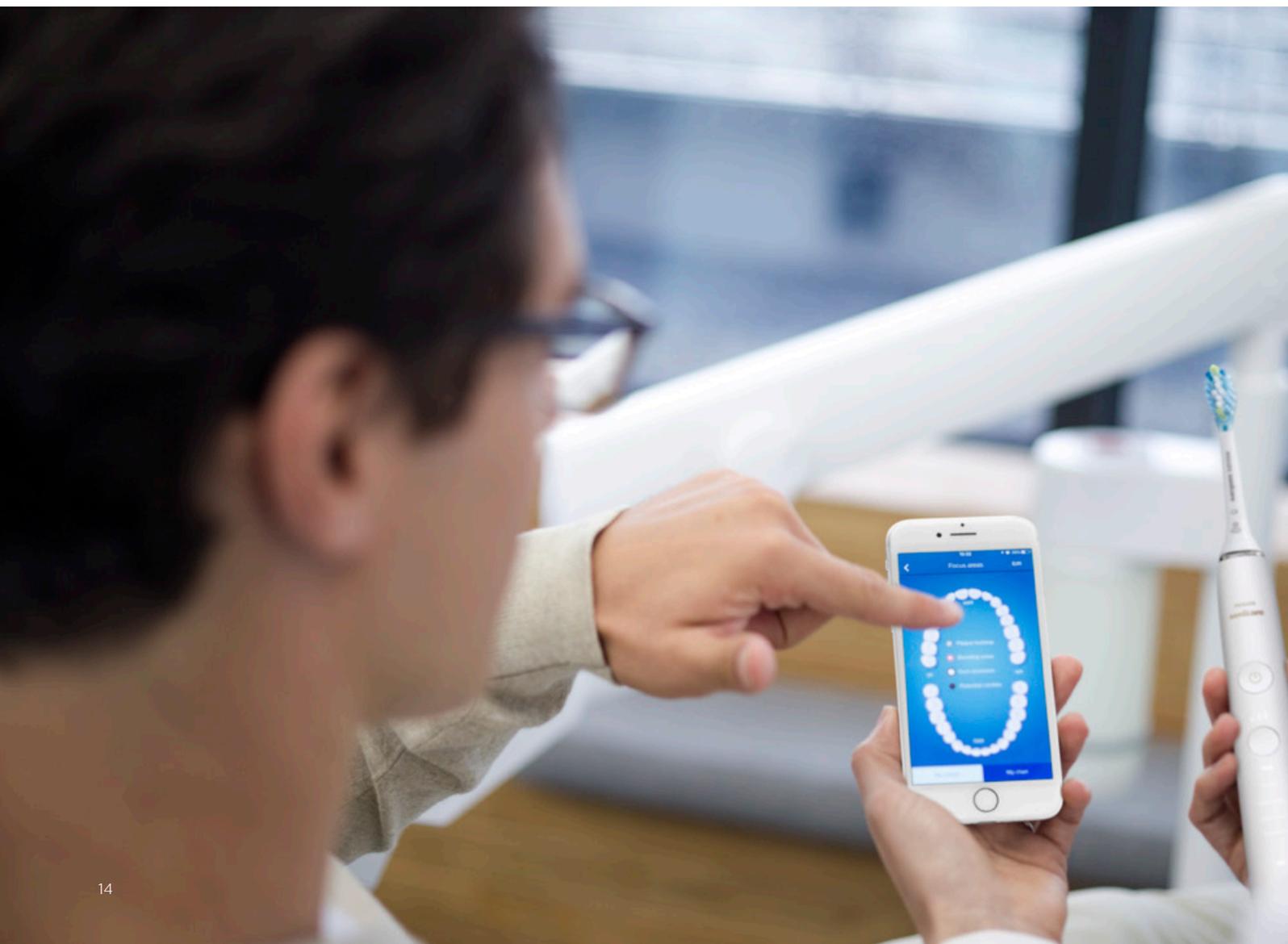

Recessioni gengivali



La testina *S Sensitive* sarebbe una scelta inappropriata. Il paziente spenderebbe troppo tempo ed energie per spazzolare senza ottenere i migliori risultati.



Le setole più lunghe della testina *i InterCare* si adattano meglio agli spazi interdentali aperti.

In stadi di parodontite avanzata e presenza di difetti ossei e recessioni gengivali, la testina **C3 Premium Plaque Defence** offre i migliori risultati, grazie alla vasta gamma di setole e al rivestimento in gomma morbida e flessibile.



C3 Premium Plaque Defence

G3 Premium Gum Care

i InterCare

Beccuccio AirFloss Ultra

Tasche parodontali



Il beneficio dell'azione fluido dinamica contribuisce all'ossigenazione del solco gengivale, spazi interdentali e tasche parodontali, dove hanno sede anche i batteri anaerobi. Un eventuale massaggio circolare, regolare, contribuisce a favorire la circolazione sanguigna nei tessuti molli circostanti.

Suggerimenti



Non riporre le testine non asciugate in maniera adeguata in ambienti chiusi, dove i batteri trovano facilmente ambiente umido e caratteristiche ideali per la loro sopravvivenza.



Non puntare mai l'ugello **AirFloss Ultra** nella direzione delle tasche parodontali.



Raccomandiamo al paziente parodontale di spazzolare per un tempo più lungo 3 - 4 minuti (2 minuti per la pulizia delle superfici dentali + 1 o 2 minuti per un massaggio gengivale).

Bambini



“Sonicare for Kids è risultato essere in grado di rimuovere in maniera statisticamente significativa più placca rispetto allo spazzolino manuale Oral B Stages 4 nei bambini di età compresa tra 7 e 10 anni. È inoltre stato dimostrato essere sicuro e delicato sui tessuti molli.”

Milleman J, Putt M, Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, Strate
 “Comparison of plaque removal by Sonicare For Kids and a manual toothbrush in children aged 7–10 years” International J Pediatric Dent, 2009 19:s1

Efficacia
Costruzione di abitudini sane
Divertimento



Philips Sonicare
 Sonicare for Kids



Responsabilità del genitore

Sia i genitori che i bambini devono imparare il corretto utilizzo di **Sonicare for Kids**. È anche importante spiegare ai genitori il loro ruolo nell'igiene quotidiana dei figli. La loro responsabilità non si esaurisce con l'acquisto di un sussidio tecnologico e moderno.



Motivare

La tecnologia Bluetooth collega lo spazzolino elettrico a un'app divertente. Il simpatico personaggio di Sparkly motiva i bambini a lavarsi i denti da soli, meglio e più a lungo attraverso un gioco educativo.

App interattiva e gratuita





Tecnica di spazzolamento

Per i denti da latte, è sufficiente spostare lo spazzolino elettrico lentamente da un dente all'altro mantenendo un angolo di 45° rispetto alla gengiva. Spazzola le superfici masticanti con facilità appoggiando le setole alla superficie e muovendo avanti e indietro. Per la dentizione mista è opportuno aggiungere un movimento, quasi a voler "accarezzare" l'intera corona del dente permanente. L'igiene di quest'area complessa dovrebbe essere completata con l'aiuto dei genitori.



Suggerimento



Il manico dello spazzolino può essere personalizzato con gli 8 fantastici stickers colorati inclusi nella confezione



For Kids Mini
3-6 anni



For Kids Standard
7 anni +

Paziente con app ortodontico



arecchio

“La combinazione dello spazzolino manuale e di un sussidio interdentale meccanico (AirFloss, ndr) ha dimostrato un miglior controllo della placca batterica e dei livelli di infiammazione gengivale rispetto al solo spazzolamento manuale nei pazienti ortodontici.”

Quaranta A., Marchisio O., D'isidoro, Genovesi AM, Covani U. "Single-blind randomized clinical trial on the efficacy of an interdental cleaning device in orthodontic patients" Minerva Stomatol. 2018 Aug;67(4):141-147.

“Il gruppo sperimentale (Sonicare + AirFloss, ndr) ha mostrato risultati migliori in tutti gli indici registrati ad ogni intervallo di tempo rispetto al baseline, mentre il gruppo controllo ha avuto una ricaduta. Molto probabilmente questo è dovuto al fatto che i dispositivi sonici sono più facili da usare, aiutando così una migliore compliance. In particolare, Philips Sonicare è risultato più efficace nella rimozione della placca interprossimale rispetto al filo interdentale e allo spazzolino interprossimale, se non ben utilizzato.”

Chiesa A, Preda C, Butera A, Segù M "Igiene orale domiciliare nel paziente multibracket" Rivista Italiana di Igiene Dentale mar-apr 2016; 12(2)

**Semplicità
Motivazione
Spazzolare attorno a brackets
e bande ortodontiche**

ESCLUSIVO
PROFESSIONAL



Philips Sonicare
Ortho Kit



Aumento del bisogno di igiene orale e di una diversa tecnica di spazzolamento

È necessaria una capacità di adattamento dello spazzolino a denti, gengive ed apparecchio ortodontico in grado di riuscire a raggiungere tutte le superfici potenzialmente rivestite da placca batterica. A questo si unisce l'ausilio di recenti tecnologie per la rimozione di residui di cibo e biofilm interdentale.



W2 Optimal White



S Sensitive



Lato linguale



Lato vestibolare



Beccuccio AirFloss Ultra

Modifica della dimensione degli spazi interdentali

Airfloss Ultra è l'aiuto ideale. Pulisce a fondo gli spazi interdentali dall'interno e dall'esterno. Grazie alla sua facilità d'uso aiuta a mantenere alta la motivazione.

Suggerimento

Le setole si consumano più rapidamente quando si lavano i denti con l'apparecchio ortodontico.



Cambiare con più frequenza la testina dello spazzolino sonico.

Non spazzolare perpendicolarmente ai brackets.



Tecnica di spazzolamento con apparecchio fisso

1. Lungo il margine gengivale: spazzolare il solco gengivale



2. La porzione superiore ai brackets ortodontici



3. La porzione inferiore ai brackets ortodontici



Per la massima efficacia, è necessario passare le setole sui lati superiore e inferiore dei brackets ortodontici separatamente. I brackets non devono essere infilati nel mezzo delle setole dello spazzolino. Lo spazzolamento della parte frontale degli archi ortodontici può essere completata dalla tecnica di spazzolamento „solo“. Il tempo di spazzolamento effettivo deve essere prolungato.

Paziente **con protesi**



dentaria

“Le evidenze ad oggi disponibili sono pienamente concordi nell’indicare come l’irrigazione giornaliera con AirFloss possa rappresentare un efficace supplemento allo spazzolamento quotidiano soprattutto per quanto riguarda il mantenimento domiciliare degli spazi interdentali e delle zone dei manufatti protesici difficili da detergere.”

Lorenzi C, Elezi A, Genovesi A “Valutazioni cliniche di un nuovo dispositivo interdentale nel mantenimento dei manufatti implantoprotesici” Odontoiatria Anno XXXIII - N. 1 pp. 11-15, Marzo 2014

Facile da usare
Combinazione con collutorio
Applicazione locale di clorexidina



Philips Sonicare
AirFloss Ultra

Philips Sonicare
DiamondClean 9000

Philips Sonicare
ExpertClean 7300

Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500



Esigenze di pulizia delle protesi

Effettuare corrette manovre di igiene orale per i pazienti protesici e implantoprotetici è spesso più difficile e/o completamente omessa. Tutto il manufatto protesico o implantoprotetico rischia quindi di andare incontro a deterioramento dei tessuti molli circostanti, perdita supporto osseo e, nel caso di impianti, al fallimento.



Beccuccio AirFloss Ultra



G3 Premium Gum Care



S Sensitive



C3 Premium Plaque Defence






Sicurezza per i materiali protesici

Le micro gocce con getti d'aria sono delicate sui materiali artificiali (protesici). Le apprezzerete, soprattutto attorno agli impianti, i quali possono essere soggetti a graffi con l'utilizzo di scovolini interdentali non appropriati.

Dettaglio del getto di micro gocce e aria di AirFloss Ultra

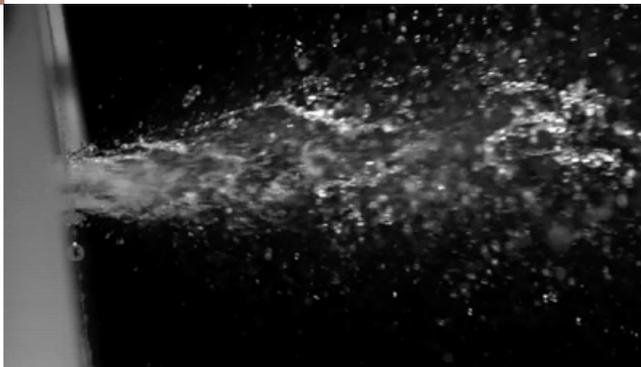

Utilizzo semplice

L'utilizzo degli strumenti Philips Sonicare per l'igiene orale è semplice ed intuitivo e ne favorisce un uso regolare con alti livelli di motivazione da parte del paziente.

A questo si aggiunge il supporto tecnologico per quei pazienti con poca manualità e/o destrezza.

Suggerimento

Applicazione di collutorio direttamente sulla zona problematica.

La frequenza di pulizia raccomandata con AirFloss Ultra è di due volte al giorno, sia dal lato linguale/palatale che da quello vestibolare. Spostare l'ugello AirFloss Ultra nell'area da trattare senza mirare direttamente nella direzione apicale.

Difetti non cariogeni e pigmentazioni



“...le testine Standard e Mini di Sonicare DiamondClean sono risultate essere meno abrasive di uno spazzolino manuale, rimuovendo il 50% in meno della dentina.”

Moore M, Putt M, Jain V, de Jager M. "In vitro assessment of dentin wear resulting from the use of the Philips Sonicare DiamondClean power toothbrush" Data on file, 2010

“Lo spazzolino Sonicare DiamondClean ha rimosso efficacemente la colorazione estrinseca dei denti sia a una che a due settimane di utilizzo ed è stato significativamente superiore a uno spazzolino manuale in entrambi i momenti.”

Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J. "Evaluation of stain removal by Philips Sonicare DiamondClean power toothbrush and manual toothbrushes" Data on file, 2010



Morbidezza delle setole
 Sensore di pressione
 Impostazione dell'intensità
 Rimozione sicura della pigmentazione



Philips Sonicare
 DiamondClean 9000

Philips Sonicare
 ExpertClean 7300

Philips Sonicare
 ProtectiveClean 4500



Erosioni, abrasioni, attriti, difetti cuneiformi

Le setole della testina **S Sensitive** sono ideali per i difetti dello smalto e anche nel caso di dentina esposta (abrasioni/erosioni).



G3 Premium Gum Care




S Sensitive



C3 Premium Plaque Defence



ESCLUSIVO PROFESSIONAL

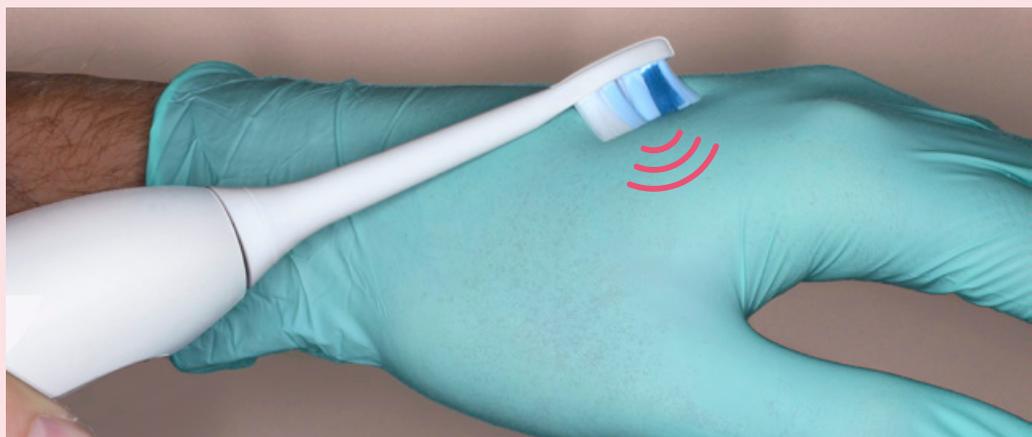

Pressione dello spazzolino

In media applichiamo una pressione di circa 250 g/cm² sullo spazzolino manuale. La sensazione diversa quando si spazzola con lo spazzolino sonico riduce naturalmente la pressione a circa 100 g/cm². **ProtectiveClean 4500** ha un sensore di pressione che controlla la pressione che applichi. Ciò consente il corretto spazzolamento sia sui tessuti duri che sui tessuti molli.

Pigmentazioni

Per i principianti consigliamo **W2 Optimal White**.
Le setole verdi nel mezzo dello spazzolino rimuovono le macchie e lucidano i denti. Si adatta molto facilmente alle aree occlusali e al solco gengivale.



W2 Optimal White



Suggerimento

I modelli di spazzolini **DiamondClean** sono grandi alleati per le procedure di sbiancamento domiciliari e professionali. Utilizzali insieme a dentifrici sbiancanti a bassa abrasività basati su principi attivi che aiutano a dissolvere le macchie.



Risposte

alle domande frequenti dei pazienti



L'utilizzo dello spazzolino sonico mi provoca il solletico.

Un'iniziale sensazione di solletico o formicolio è assolutamente naturale. Non essere scoraggiato! Questa sensazione si interrompe nella maggior parte dei casi dopo pochi giorni.



Ho sentito che gli spazzolini elettrici non dovrebbero essere usati tutti i giorni.

Non preoccuparti di utilizzare Philips Sonicare due volte al giorno. Questo è l'unico modo per ottenere i migliori risultati.



Lo spazzolino crea recessioni?

Se usato correttamente no. Appoggia lo spazzolino delicatamente tra dente e gengiva, preferibilmente con un angolo di 45° verso la gengiva. Attiva lo spazzolino, lascialo agire per 2 secondi su ciascun dente, senza muoverlo, spostati poi delicatamente verso il dente successivo. Fai questo esercizio sulle superfici vestibolari (esterne), linguali (interne) e masticanti. A fine spazzolamento, non dimenticare di pulire anche la lingua!



Come prendersi cura dello spazzolino Philips Sonicare?

Lavare l'intero spazzolino sotto l'acqua corrente dopo ogni utilizzo. Rimuovere sempre la testina, sciacquare la base di ricarica e lasciare asciugare entrambe le parti separatamente. Impedirai la formazione di muffe e calcare e che il dentifricio si secchi sullo spazzolino. Questo ne prolungherà la vita.



Con cosa posso riempire il serbatoio di AirFloss Ultra?

È possibile utilizzare acqua pura o collutorio anche antibatterico senza agente schiumogeno. Dopo aver usato AirFloss Ultra, rimuovi l'ugello e sciacqua il prodotto con acqua. Quindi lascia asciugare.



Tutte le testine Sonicare sono compatibili con tutti gli spazzolini sonici Sonicare?

Sì, sono tutte compatibili e intercambiabili a seconda delle tue esigenze.



Cosa comporta l'impugnatura scorretta dello spazzolino elettrico?

Una presa spasmodica porta ad una eccessiva pressione sullo spazzolino e la "presa a penna" tipica dello spazzolino manuale causa un'aderenza insufficiente delle setole alla superficie dei denti e delle gengive.



Devo ricaricare spesso la batteria di Sonicare?

No, una carica dura fino a 14 giorni.



Specchio sporco?

Non dimenticare di accendere lo spazzolino solo in bocca, eviterai di dover ripulire lo specchio del bagno più del previsto.



Una testina per ogni esigenza



Ogni testina è compatibile con qualsiasi spazzolino Philips Sonicare.



Bambini



For Kids

- disponibile in formato Mini (dai 3 ai 6 anni) e in formato Standard (dai 7 anni in su)

Placca



C1 ProResults

- efficace rimozione della placca



C2 Optimal Plaque Defence

- pulizia accurata e profonda • efficace rimozione della placca



C3 Premium Plaque Defence

- parodontite • radici esposte • pulizia accurata • per i pazienti che non usano la tecnica di pulizia corretta

Gengive e sensibilità



S Sensitive

- sensibilità all'infiammazione delle gengive • collo del dente sensibile • protesi e impianti • apparecchio ortodontico fisso • difetti dello smalto



G3 Premium Gum Care

- sensibilità all'infiammazione gengivale e parodontite • prurito del dente • difetti delle gengive • colli dentali sensibili • lavoro protesico e protesi

Ortodonzia



i InterCare

- anomalie ortodontiche • denti spinali • apparecchio ortodontico fisso • difetti dello smalto • parodontite

Pigmentazioni



W2 Optimal White

- rimozione delle macchie • lucidatura dei denti • durante lo sbiancamento dei denti • pulizia regolare

Spazi interdentali



Beccuccio AirFloss Ultra

- pulizia profonda degli spazi interdentali



Una testina per ogni esigenza

	C3 Premium Plaque Defence HX9042/17	G3 Premium Gum Care HX9052/17	i InterCare HX9002/10
Principale benefit	Pulizia profonda	Gengive sane	Gengive sane
Caratteristiche			
Testina	Testina rivestita in gomma morbida e flessibile che si adatta perfettamente a denti e gengive per una superficie di contatto fino a 4 volte maggiore**	Testina rivestita in gomma morbida e flessibile che si adatta perfettamente a denti e gengive.	Testina con setole extralunghe per pulire in profondità gli spazi interdentali rimanendo delicate sulle gengive.

**rispetto a una testina W2 Optimal White

	W2 Optimal White HX6062/10	C2 Optimal Plaque Defence HX9022/10	C1 ProResults HX6012/07
Principale benefit	Denti bianchi	Pulizia profonda	Pulizia profonda
Caratteristiche			
Testina	Testina con setole disposte a forma di diamante per rimuovere le macchie superficiali.	Testina con setole curve per raggiungere le zone più difficili della bocca.	Testina con setole sagomate per adattarsi in modo naturale alla forma dei denti e per pulire le zone difficili da raggiungere.

	S Sensitive HX6052/07	ForKids Mini 3-6 anni HX6032/33	ForKids 7 anni + HX6042/33	Beccucci AirFloss Ultra HX8032/07
Principale benefit	Per denti sensibili	Ideale per bambini dai 3 ai 6 anni	Ideale per bambini dai 7 anni in su	Per una pulizia profonda degli spazi interdentali
Caratteristiche				
Testina	Testina con setole ultra morbide per una pulizia particolarmente delicata ed efficace.	Con rivestimento in gomma e setole morbide	Con rivestimento in gomma e setole morbide	Per AirFloss Ultra



Tutte le testine per spazzolino elettrico sonico sopra illustrate, eccezion fatta per C1 ProResults, S Sensitive e le testine ForKids, presentano la tecnologia RFID, che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino Philips Sonicare. Grazie a questa tecnologia è possibile, sulla base del modello del manico dello spazzolino, fruire di

due funzionalità:

- **BrushSync Reminder:** il promemoria sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è il momento di sostituire la testina.
- **BrushSync Mode Pairing:** la testina si associa automaticamente alla modalità predefinita.

Spazzolini elettrici

Philips Sonicare

Tutti gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati di:


- **Tecnologia sonica** grazie alla quale la testina si muove ad alta frequenza, fino a 62.000 movimenti al minuto. Il movimento crea delle sottili microbolle di ossigeno che vengono direzionate tra gli spazi interdentali, per pulire delicatamente e in profondità. Per una sensazione di pulizia che puoi vedere e sentire.
- **SmarTimer** timer di 2 minuti per aiutarti a dedicare il corretto tempo di spazzolamento.
- **Programma Easystart** che aumenta gradualmente l'ampiezza del movimento della testina per aiutare ad abituarsi a una nuova modalità di pulizia, diversa dallo spazzolino tradizionale.
- **Sensore di pressione** che avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva.*
- **BrushSync reminder** il promemoria sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è il momento di sostituire la testina.*
- **BrushPacer** scandirà il tempo di spazzolamento consigliato (2 minuti) in sei parti da 20 secondi ciascuna, per aiutarti a dedicare a ciascuna zona della tua bocca il tempo minimo suggerito dai dentisti.*



*Funzionalità non presenti in Philips Sonicare ForKids.

Spazzolini elettrici Philips Sonicare

Prova tu stesso la differenza...

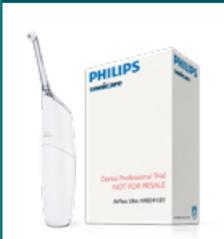	ExpertClean 7300 Trial HX9641/01	ProtectiveClean 4300 Trial HX6848/92	AirFloss Ultra Trial HX8341/01
			
 Principale benefit	Pulizia profonda Gengive sane	Gengive sane Denti bianchi	Pulizia profonda degli spazi interdentali
 Caratteristiche tecniche			 Semplice
Tecnologia sonora	✓	✓	Semplice utilizzo con tasto grande
Movimenti testina al minuto	62.000	62.000	Impostazioni personalizzabili
Modalità di pulizia	3 (Clean, Deep Clean+, Gum Health)	1 (Clean)	Beccuccio inclinato ed impugnatura ergonomica
Intensità di pulizia	3 (Alta, media, bassa)	2	Serbatoio facile da ricaricare (acqua o collutorio) con sist. anti-goccia
Tipologia testine incluse nella confezione	1 testina C3 Premium Plaque Defence, 1 testina G3 Premium Gum Care	1 testina i InterCare Mini, 1 testina W2 Optimal White	 Veloce
Numero testine incluse nella confezione	2	2	Pulizia spazi interdentali
Funzionalità	BrushSync Mode Pairing, BrushSynch Reminder, BrushPacer, Sensore di pressione, di localizzazione e di spazzolamento	BrushSynch Reminder, BrushPacer, Sensore di pressione	Modalità di pulizia con getti continui ad intermittenza
 Tecnologia di ricarica			 Efficace
Batteria	Ioni di Litio	Ioni di Litio	Tecnologia ad aria e microgocce con getto personalizzabile (spruzzo singolo, doppio o triplo)
Autonomia	14 giorni	14 giorni	Aiuta a migliorare le condizioni delle gengive e a prevenire le carie
 Accessori esclusivi			 Tecnologia moderna di ricarica
Altro	Connettività con App Philips Sonicare con Progress Report		Batteria
			Autonomia
			Spia stato di carica
			 Accessori esclusivi
			Altro
			1 beccuccio AirFloss incluso nella confezione

...e poi raccomandalo

	DiamondClean 9000 HX9911/03	ExpertClean 7300 HX9681/01	ProtectiveClean 4500 HX6888/88	ProtectiveClean 4300 HX6807/04	Sonicare ForKids HX6322/04
					
Principale benefit	Denti bianchi Design unico	Pulizia profonda Gengive sane	Gengive sane	Pulizia profonda	Per bambini
Caratteristiche tecniche					
Tecnologia sonora	✓	✓	✓	✓	✓
Movimenti testina al minuto	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Modalità di pulizia	4 (Clean, Deep Clean+, Gum Health, White+)	3 (Clean, Deep Clean+, Gum Health)	2 (Clean, Gum Care)	1	2 (delicata per i bambini più piccoli, intensa per i più grandi)
Intensità di pulizia	3 (Alta, media, bassa)	3 (Alta, media, bassa)	2 (Alta, Bassa)	2 (Alta, bassa)	1
Tipologia testine incluse nella confezione	1 testina W3 Premium White	1 testina C3 Premium Plaque Defence, 1 testina G3 Premium Gum Care	1 testina i InterCare, 1 testina i InterCare Mini	1 testina C2 Optimal Plaque Defence	1 testina For Kids Standard, 1 testina For Kids Mini
Numero testine incluse nella confezione	1	2	2	1	2
Funzionalità	BrushSync Mode Pairing, BrushSync Reminder, BrushPacer, Sensore di pressione	BrushSync Mode Pairing, BrushSync Reminder, BrushPacer, Sensore di pressione, di localizzazione e di spazzolamento	BrushSynch Reminder, BrushPacer, Sensore di pressione	BrushSynch Reminder, BrushPacer, Sensore di pressione	KidTimer, KidPacer
Tecnologia di ricarica					
Batteria	Ioni di Litio	Ioni di Litio	Ioni di Litio	Ioni di Litio	Ioni di Litio
Autonomia	14 giorni	14 giorni	14 giorni	14 giorni	14 giorni
Accessori esclusivi					
Altro	Bicchiere di ricarica, custodia da viaggio con cavo USB di ricarica, connettività con App Philips Sonicare con Progress Report	Custodia da viaggio, connettività con App Philips Sonicare con Progress Report	Custodia da viaggio		8 stickers per personalizzare il manico dello spazzolino, connettività con l'App Sonicare ForKids



Sonic



Spazzolini elettrici Philips Sonicare

Completa il tuo portafoglio prodotti per un'igiene orale ottimale

AirFloss Ultra
HX8438/01

Ortho Kit
HX8443/71



Principale benefit

Pulizia profonda degli spazi interdentali

Per pazienti con apparecchio odontoiatrico



Semplice

AirFloss Ultra

ProtectiveClean 4300

Semplice utilizzo con tasto grande

✓

✓

Tecnologia sonora

Impostazioni personalizzabili

3

3

Movimenti testina 62.000 al minuto

Beccuccio inclinato ed impugnatura ergonomica

✓

✓

1 Modalità di pulizia (Clean)

Serbatoio facile da ricaricare (acqua o collutorio) con sist. anti-goccia

✓

✓

2 Intensità di pulizia



Veloce

Pulizia spazi interdentali

60 secondi

60 secondi

1 testina i InterCare, 1 testina W2 Optimal White

Modalità di pulizia con getti continui ad intermittenza

✓

✓



Efficace

Tecnologia ad aria e microbolle con getto personalizzabile (spruzzo singolo, doppio o triplo)

✓

✓

BrushSynch Reminder, BrushPacer, Sensore di pressione

Aiuta a migliorare le condizioni delle gengive e a prevenire le carie

✓

✓



Tecnologia moderna di ricarica

Batteria

Ioni di Litio

Ioni di Litio

Ioni di Litio

Autonomia

14 giorni

14 giorni

14 giorni

Spia stato di carica

✓

✓



Accessori esclusivi

Altro

2 beccucci AirFloss inclusi nella confezione

Base di ricarica

Per ulteriori informazioni
www.philips.it/sonicare
sonicareitalia@philips.com
 © 2020 Koninklijke Philips N.V.
 Tutti i diritti riservati

